



Verwenden des Stimulators ohne Programmiergerät

Video Anweisungen



! Verwenden Sie den Stimulator ohne das Programmiergerät nur, wenn Sie sich an die Elektrodenplatzierung und die Verkabelungskonfiguration erinnern können

1 Stimulator einschalten



2 Haut wie folgt vorbereiten:


- Platzieren Sie Elektroden nicht auf gereizter Haut
- Reinigen Sie die Haut, wo die Elektroden befestigt werden
- Vergewissern Sie sich, dass die Haut trocken ist, bevor Sie die Elektroden anbringen




3 Elektroden gemäß Programm platzieren



4 Elektroden an Verlängerungskabel anschließen

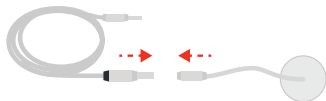

5 Verlängerungskabel an die Verteilerbox anschließen

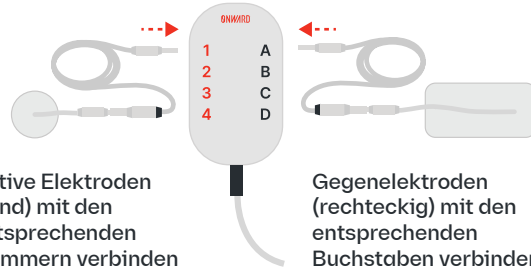

Aktive Elektroden (rund) mit den entsprechenden Nummern verbinden

Gegenelektroden (rechteckig) mit den entsprechenden Buchstaben verbinden

6 Verteilerbox mit Stimulator verbinden



7 Stimulation beginnen



8 Stimulation steuern



- Amplitude verringern
- Amplitude erhöhen
- Stimulation pausieren

Um die Stimulation zu beenden, halten Sie die mittlere Taste nach dem Pausieren 3 Sek. lang gedrückt.

Nach Abschluss einer Sitzung:

- Schalten Sie den Stimulator aus, trennen Sie die Verteilerbox vom Stimulator und entfernen Sie die Elektroden
- Reinigen und laden Sie den Stimulator, falls erforderlich
- Legen Sie alle Komponenten zurück in den Koffer
- Überprüfen Sie die Unversehrtheit der Haut (Hautausschlag oder Verbrennungen)



Kurzanleitung für den persönlichen Gebrauch

ONWARD Kontakt

- USA gebührenfrei: +1 (866) 217 0817
- USA: +1 (617) 488 8642
- EU: +31 40 288 2830
- www.onwd.com/support

Nur zur Verwendung von ONWARD




2026/01/23

P/N EXQRG01PERDE rev 1

ARC EX Komponenten:

- ARC EX Stimulator
- Verteilerbox
- Verlängerungskabel
- Gegenelektroden (rechteckig)
- Aktive Elektroden (rund)
- Programmiergerät (myARC EX App)

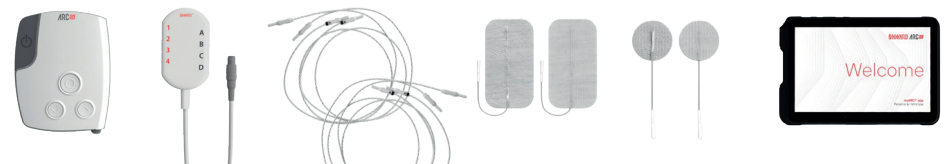

- ! Platzieren Sie Elektroden nicht auf gereizter Haut. Platzieren Sie die Elektroden wie von Ihrer Rehabilitationsfachkraft angewiesen (siehe Bildschirm „Kanäle“).
- Stelle sicher, dass die Verlängerungskabel genau so mit den Elektroden und der Verteilerbox verbunden sind, wie es von deinem Rehabilitationsfachpersonal festgelegt wurde. Eine falsche Einrichtung kann das Risiko von Muskelkrämpfen, Steifheit, Kribbeln oder Taubheitsgefühlen („Nadeln“), Veränderungen der Herzfrequenz oder autonomer Dysreflexie erhöhen.

Bevor Sie das ARC EX System verwenden, konsultieren Sie die ARC EX Gebrauchsanweisung für alle WARNUNGEN und VORSICHTSMASSNAHMEN.



Verwenden des Stimulators mit dem Programmiergerät



1 Den Stimulator einschalten, dann das Programmiergerät. Fortfahren mit „Gerät anschließen“

2 Stimulator wählen

3 Programm auswählen und mit dem Bildschirm „Kanäle“ fortfahren

4 Die Haut an den auf dem Bildschirm „Kanäle“ des Programmiergerätes angezeigten Stellen reinigen. Nicht fortfahren, wenn Sie Hautirritationen bemerken

5 Elektroden gemäß dem Bildschirm „Kanäle“ des Programmiergeräts auf dem Körper platzieren (Bild unten ist ein Beispiel)

6 Elektroden an Verlängerungskabel anschließen

7 Verlängerungskabel an die Verteilerbox anschließen, wie auf dem Bildschirm „Kanäle“ gezeigt

8 Verteilerbox mit Stimulator verbinden

9 Fortfahren und Elektrodenposition bestätigen

10 Stimulation starten

11 Stimulation steuern

- ⊖ Amplitude verringern
- ⊕ Amplitude erhöhen
- ⏸ Stimulation pausieren
- ⏹ Stimulation beenden

Nach Abschluss einer Sitzung:

1. Stimulator und das Programmiergerät ausschalten, die Verteilerbox vom Stimulator trennen und Elektroden entfernen
2. Falls erforderlich, das Programmiergerät und den Stimulator reinigen und aufladen
3. Alle Komponenten zurück in den Koffer legen
4. Überprüfen Sie die Unversehrtheit der Haut (Hautausschlag oder Verbrennungen)