



Utilizzo dello stimolatore senza il programmatore



ARC EX

! Utilizzare lo stimolatore senza il programmatore solo se si è in grado di ricordare dove posizionare gli elettrodi e la configurazione dei cavi di prolunga

1 Accendere lo stimolatore



2 Preparare la pelle come segue:


- Non posizionare gli elettrodi sulla pelle irritata
- Pulire la pelle dove saranno posizionati gli elettrodi
- Assicurarsi che la pelle sia asciutta prima di posizionare gli elettrodi



3 Posizionare gli elettrodi secondo il programma



4 Collegare gli elettrodi ai cavi di prolunga

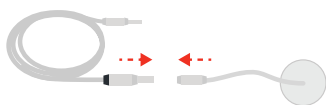

5 Collegare i cavi di prolunga al divisore



Collegare gli elettrodi attivi (rotondi) ai numeri corrispondenti

Collegare gli elettrodi di ritorno (rettangolari) alle lettere corrispondenti

6 Collegare il divisore allo stimolatore



7 Avviare la stimolazione



8 Controllare la stimolazione



Al termine della sessione:

1. Spegnerlo lo stimolatore, scollegare il divisore dallo stimolatore e rimuovere gli elettrodi
2. Pulire e caricare lo stimolatore, se necessario
3. Riporre tutti i componenti nella valigetta
4. Controllare l'integrità della pelle (eruzioni cutanee o ustioni)

ONWARD

ARC EX

Guida rapida di riferimento Uso personale

Per contattare ONWARD

- Numero verde USA: +1 (866) 217 0817
- USA: +1 (617) 488 8642
- UE: +31 40 288 2830
- www.onwd.com/support


Solo per uso ONWARD



2026/01/23

P/N EXQRG01PERIT rev1

Componenti ARC EX:

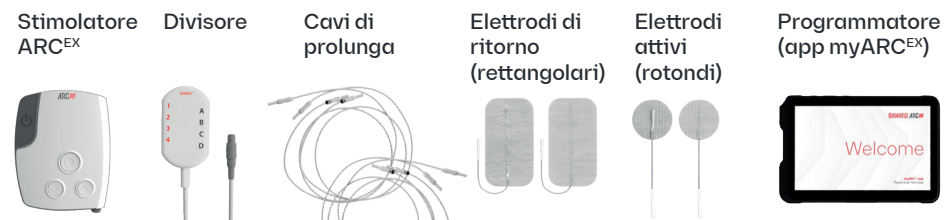

- !** Gli elettrodi non devono essere applicati sulla pelle irritata. Posizionare gli elettrodi come indicato dal professionista della riabilitazione (fare riferimento alla schermata "Canali").
- Assicurarsi che i cavi di prolunga siano collegati agli elettrodi e al divisore esattamente come indicato dal professionista della riabilitazione. Un collegamento errato può aumentare il rischio di spasmi muscolari, rigidità, formicolio o intorpidimento (sensazione di spilli e aghi), variazioni della frequenza cardiaca o disreflessia autonoma.

Prima di utilizzare il sistema ARC EX, consultare le istruzioni per l'uso di ARC EX per tutte le AVVERTENZE e le PRECAUZIONI.



Utilizzo dello stimolatore con il programmatore



1 Accendere lo stimolatore e poi il programmatore. Selezionare "Connetti dispositivo"

2 Selezionare lo stimolatore

3 Selezionare il programma e passare alla schermata "Canali"

4 Pulire la pelle nelle posizioni mostrate nella schermata "Canali" sul programmatore. Non continuare se la pelle appare irritata

5 Posizionare gli elettrodi sul corpo in base alla schermata "Canali" del programmatore
(l'immagine sotto è un esempio)

6 Collegare gli elettrodi ai cavi di prolunga

7 Collegare i cavi di prolunga al divisore, come indicato nella schermata "Canali"

Collegare gli elettrodi attivi (rotondi) ai numeri corrispondenti

Collegare gli elettrodi di ritorno (rettangolari) alle lettere corrispondenti

8 Collegare il divisore allo stimolatore

9 Continuare e confermare la posizione degli elettrodi

10 Avviare la stimolazione

11 Controllare la stimolazione

⊖ Diminuire l'ampiezza

⊕ Aumentare l'ampiezza

⏸ Mettere in pausa la stimolazione

⏹ Terminare la sessione

Al termine della sessione:

1. Spegnerlo lo stimolatore e il programmatore, scollegare il divisore dallo stimolatore e rimuovere gli elettrodi
2. Pulire e ricaricare il programmatore e lo stimolatore, se necessario
3. Riporre tutti i componenti nella valigetta
4. Controllare l'integrità della pelle (eruzioni cutanee o ustioni)